

目立たない
ホワイトコーティング
ワイヤー シリーズ



審美矯正に

ステンレススチール & ニッケルチタンワイヤー
コーティングタイプ



アーチワイヤーの表面に、
ホワイトコーティングをし、
その上に、柔軟性および耐久性に優れた
UV樹脂コーティングをしているため、
着色や変色しにくく、クラッキングや
チッピングを防止します。



ステンレススチール & ニッケルチタンワイヤー コーティングタイプ

二重のコーティングによって審美性および耐久性の向上を実現！

- ステンレススチール & ニッケルチタンのアーチワイヤーの表面に、歯冠色に順応する審美性ホワイトコーティングをし、その上に、柔軟性および耐久性に優れたUV樹脂コーティングをしているため、着色や変色しにくく、クラッキングやチッピングを防止します。
- ジルコニア、セラミックス、プラスチックブラケットと併用した審美矯正に最適です。





コーティングの特徴

ホワイトコート層（1層目）

- 歯冠色に順応する明るい色調です。

UV樹脂層（2層目）

- 柔軟性および強度があるため、ワイヤー屈曲時のクラッキングを防止します。
- 光沢性があるため、ワイヤーの滑りが良く、早期の剥離を防止します。コーティングが変色しにくく、耐久性に優れています。

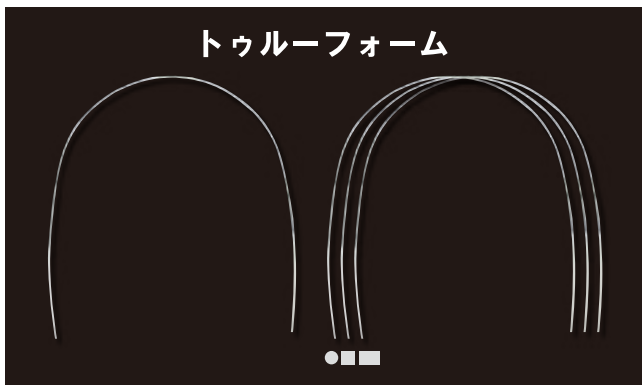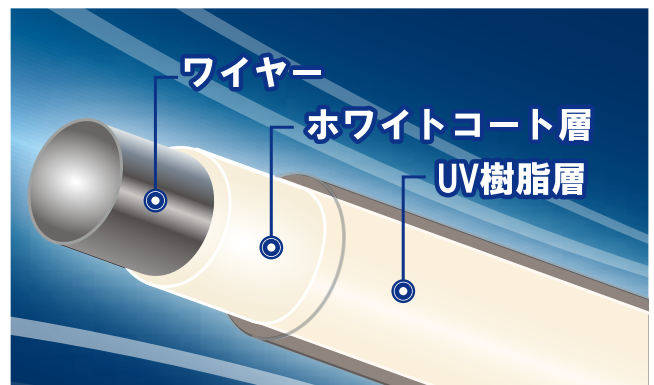

ブラッシングによる摩耗試験



試験前 20,000回ブラッシング試験後
二重にコーティングすることにより、耐摩耗性を実現しました。 自社試験

ステンレスワイヤー コーティングタイプ

Inches	上顎用	下顎用
0.014	83-014W	84-014W
0.016	83-016W	84-016W
0.018	83-018W	84-018W
0.016 × 0.016	83-1616W	84-1616W
0.016 × 0.022	83-1622W	84-1622W
0.017 × 0.025	83-1725W	84-1725W
0.018 × 0.025	83-1825W	84-1825W
0.019 × 0.025	83-1925W	84-1925W

ニッケルチタンワイヤー コーティングタイプ

Inches	上顎用	下顎用
0.012	73-012W	74-012W
0.014	73-014W	74-014W
0.016	73-016W	74-016W
0.018	73-018W	74-018W
0.016 × 0.016	73-1616W	74-1616W
0.016 × 0.022	73-1622W	74-1622W
0.017 × 0.025	73-1725W	74-1725W
0.018 × 0.025	73-1825W	74-1825W
0.019 × 0.025	73-1925W	74-1925W

※ニッケルチタンワイヤーはコーティングなしもご用意しています。

販売元



株式会社ミツバオーソサプライ
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨2-16-4メゾンカタヤマ2F
TEL. 03-3949-0066 FAX. 03-3949-0090
URL <http://www.mitsuba-ortho.com>

製造販売元: 株式会社モリムラ
〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-28-10-3F
TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351